






# Weil das Ergebnis zählt









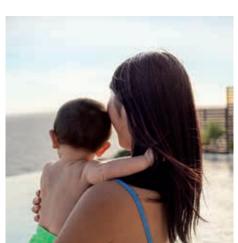

# Wundversorgung



# Wichtige **Tipps und Tricks** für die Wundversorgung

- Nehmen Sie die Schmerzen des Patienten immer ernst
- Klären Sie die Ursache für die Wunde
- Jede Berührung der Wunde kann Schmerzen verursachen
- Schonendes Ablösen der Wundauflage, ggf. durch Anfeuchten der Wundauflage
- Unnötige Reize wie z.B. Zugluft oder Anstoßen/Stechen der Wunde vermeiden
- Dokumentieren Sie jeden Verbandwechsel
- Beachten Sie die Richtlinien zur Infektionskontrolle
- Verwenden Sie nur sterile Instrumente z.B. zum Zuschneiden der Materialien
- Materialien, die Wundkontakt haben, müssen steril sein; einmal angebrochene Materialien finden beim nächsten Verbandwechsel keine Verwendung mehr; siehe ② auf der Verpackung
- Reinigen Sie die Wunde stadiengerecht
- Wundspüllösungen vor Gebrauch ggf. anwärmen

- Entfernen Sie die Schutzfolie erst nach dem Zuschneiden
- Wählen Sie einen Verband, der beim Verbandwechsel keine Schmerzen oder eine Traumatisierung der Wunde verursacht oder die Wundumgebungshaut verletzt
- Folienverbände bei der Entfernung parallel zur Haut überdehnen
- Wundfüller z.B. Alginate nicht stopfen
- Verband spannungsfrei applizieren und darauf achten, dass es keine Einschnürungen durch zu festes Anlegen von fixierenden Binden gibt
- Bedenken Sie die Fließrichtung des Exsudats beim Positionieren des Verbands
- Keine einschnürende Kleidung tragen, z.B. Socken mit engen Bündchen, Miederhosen, Korsetts, da diese die Durchblutung stören

Bitte beachten Sie immer die Packungsbeilage des jeweiligen Produktes.



### Hinweis:

Dies sind allgemeine Ratschläge zur Wundversorgung und haben keinerlei Anrecht auf Vollständigkeit. Bitte beachten Sie ggf. Ihre lokalen Behandlungsrichtlinien! Bitte beachten Sie die jeweiligen Gebrauchsanweisungen der Verbände!

# **Inhalt**

SCHAUMVERBÄNDE	Mepilex XT	
& SUPERABSORBER	Mepilex / Heel	
	Mepilex Lite	
	Mepilex Border Flex	
	Mepilex Border / Sacrum / Heel	
	Mepilex Border Lite	
	Mextra Superabsorbent	
	Mepilex Border Post-Op	16
ANTIMIKROBIELLE	Mepilex Border Ag / Sacrum Ag	19
WUNDAUFLAGEN	Exufiber Ag+	20
	Mepilex Transfer Ag	
	Melgisorb Ag	
	Mepilex Ag / Heel Ag	24
WUNDKONTAKTAUFLAGEN	Mepitel & Mepitel One	
& FILMVERBÄNDE	Mepitel Film	
	Mepore Film	
	Mepore Film Roll	
	Mepilex Transfer	30
ALGINATE & FASERVERBÄNDE	Melgisorb Plus	
	Exufiber	32
WUNDSCHNELLVERBÄNDE	Mepore Film & Pad	
& FIXIERUNG	Mepore Pro	
	Mepore	
	Mepore IV	
	Tubifast & Tubifast Garments	
	Mepitac	
	Mefix	38
SONSTIGES	Mepiform (Narbenbehandlung)	
	Mesalt	
	Mestopore	40
	ZUSCHNITTMUSTER	
	Produkte ohne Haftrand	
	Produkte mit Haftrand	

Stand: September 2019



### Proving it every day

Mölnlycke liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren. Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte zu unterstützen, ihr Bestes zu geben um somit eine bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten zu gewährleisten. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.



### Was wir tun

Unsere Lösungen ermöglichen eine bessere und effizientere Versorgung von Patienten an allen Standorten – vom Krankenhaus bis nach Hause:

### 1. Wundversorgung

Mit evidenzbasierten Wundversorgungslösungen (z.B. Verbände mit Safetac® Technologie)

### 2. Dekubitusprophylaxe

Wir reduzieren das Risiko von Dekubitalulzera mit prophylaktischen Verbänden und Hilfsmitteln, die medizinischen Fachkräften die Umlagerung von Patienten erleichtern, sowie durch unterstützende Schulungs- und Beratungsservices.

### 3. Chirurgische Lösungen

Wir erhöhen die Sicherheit und Effizienz im und rund um den OP mit maßgeschneiderten Trays, die auch chirurgische Instrumente beinhalten. Zudem schützen wir Personal und Patienten durch Abdecktücher, OP-Kleidung, Antiseptika und OP-Handschuhe vor Infektionen und bieten entsprechende Fortbildungen und Fachberatung.



### Die Gesundheitsversorgung verbessern

Weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, beschränken wir uns nicht darauf, Produkte zu verkaufen. Wir unterstützen medizinische Fachkräfte auch dabei, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Daran anknüpfend nutzen wir unser umfassendes Fachwissen, um passende Lösungen zu entwickeln, die zu besseren Ergebnissen führen.



### Innovation für die Zukunft

Angetrieben durch unser stetiges Streben nach Lösungen für unerfüllte Bedürfnisse in der Gesundheitsversorgung werden wir weiter Innovationen schaffen und hochwertige, kostengünstige Lösungen entwickeln, die neue Standards setzen. Wir werden auch weiterhin eng mit Branchenverbänden, Gesundheitsorganisationen und Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um an Gesundheitsvorschriften und Leitlinien mitzuwirken und die Therapiestandards zu erhöhen. Wir unterstützen alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen, von Pflegekräften und Ärzten über Krankenhausmanager und häusliche Pflegedienste bis hin zu Einkäufern dabei, die besten Ergebnisse zu erzielen.


### Die Safetac® Technologie – der entscheidende Unterschied

Die sanfte Safetac Technologie passt sich auch den kleinsten Strukturen der Haut an, während die Kleber anderer Verbände nur Kontakt mit den obersten Hautzellen haben. So werden Schmerzen beim Verbandwechsel minimiert, die Wundränder wirksam geschützt und Mazerationen vorgebeugt.

### Herkömmlicher Kleber



Abziehen der obersten Hautschicht bei herkömmlichem Klebstoff

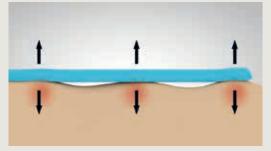


Herkömmliche Klebstoffe haften nur am oberen Rand der Hautporen und müssen deshalb eine stärkere Haftkraft aufweisen, damit der Verband sicher sitzt.

### Verbände mit Safetac® Technologie



Kein Abziehen der obersten Hautschicht bei der Safetac Technologie

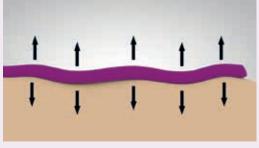

Safetac passt sich an die Poren an und versiegelt so die Wundränder. Wundauflagen mit Safetac haften sanft aber sicher.

### Nachweislich die beste Wahl für ein optimales Ergebnis.

Die von Mölnlycke Health Care entwickelte Safetac\* Technologie bietet Vorteile, die weit über die üblichen Produktversprechen hinausgehen. Safetac optimiert nachweislich den Wundheilungsprozess und kann Wunden sogar vorbeugen. Verbände mit Safetac sind auf jeden Fall eine sichere Wahl für Patienten und Wegbereiter für einen neuen, hohen Standard im

Bereich der Wundversorgung. Uns liegen zahlreiche Belege dafür vor, die die klinischen und wirtschaftlichen Vorteile von Verbänden mit Safetac, darunter Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® und Mepitac® untermauern. Bereits heute haben unsere Verbände das Leben von Millionen Patienten weltweit erleichtert 1-3.



<sup>\*</sup> Eine Technologie, die ausschließlich von Mölnlycke Health Care erhältlich ist.

# Mepilex® XT










### Schaumverband für alle Wundphasen

Mepilex XT ist ein weicher Schaum, der für leicht bis mittelstark exsudierende und chronische Wunden in allen Heilungsstadien vorgesehen ist.

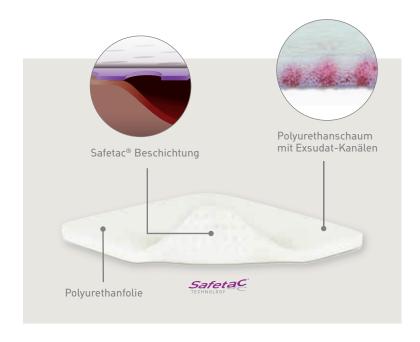

Anwendungssicherheit durch effektive Aufnahme aller Exsudat-Arten

Ergänzungsprodukt zur Fixierung:



### Vorteile

- absorbiert alle Arten von Exsudat, auch zähflüssiges
- Einsatz in allen Wundheilungsphasen
- Reduzierung der Verbandwechsel
- besonders geeignet bei atraumatischem und schmerzarmen Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- leicht bis mittelstark exsudierende Wunden, auch zähflüssiges Exsudat
- chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fußsyndrom, Dekubitus
- Verbrennungen bis Grad 2a

### Beispiele für Anwendungsgebiete



Versorgung an schwierigen Körperstellen



Ulcus cruris arteriosum

### Bestellinformationen

### Home Care

ArtNr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
21 10 15	5 x 5 cm	11 30 38 38	5	40
21 11 00	10 x 10 cm	07 05 23 36	5	70
21 12 00	10 x 20 cm	07 05 23 42	5	45
21 13 00	15 x15 cm	07 05 23 59	5	25
21 14 00	20 x 20 cm	07 05 23 65	5	20
21 15 00	20 x 50 cm	11 47 94 60	2	12

Steril – einzeln verpackt

### Klinik

ArtNr.	Größe	Stück/Packung	Stück/Karton
21 10 15	5 x 5 cm	5	40
21 11 10	12,5 x 12,5 cm	5	50
21 12 10	10 x 21 cm	5	45
21 13 10	17,5 x17,5 cm	5	25
21 14 10	21 x 22 cm	5	20
21 15 00	20 x 50 cm	2	12

Steril – einzeln verpackt

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.













### Schaumverband

Mepilex ist ein weicher Schaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht bis mittelstark exsudierender Wunden.



### Ergänzungsprodukt zur Fixierung:



### Beispiele für Anwendungsgebiete



### Vorteile

- absorbiert Exsudat schnell und zuverlässig
- extrem weich und anpassungsfähig
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fußsyndrom
- Verbrennungen bis Grad 2a

### Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



### Bestellinformationen

### Home Care

ArtNr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
29 40 15	5 x 5 cm	09 31 30 54	5	40
29 41 50	10 x 12 cm	01 60 33 38	5	50
29 42 50	12 x 20 cm	01 60 33 50	5	50
29 43 50	15 x 17 cm	01 60 33 73	5	25
29 44 50	20 x 22 cm	01 60 34 04	5	20
29 45 00	20 x 50 cm	01 16 68 14	2	12
Mepilex Heel				
28 81 00	13 x 20 cm	04 79 10 62	5	25
Steril – einze	ln verpackt			

Klinik

ArtNr.	Größe	Stück/Packung	Stück/Karton
29 40 15	5 x 5 cm	5	40
29 41 00	10 x 10 cm	5	70
29 42 00	10 x 20 cm	5	45
29 43 00	15 x 15 cm	5	25
29 44 00	20 x 20 cm	5	20
29 45 00	20 x 50 cm	2	12

### Mepilex Heel

28 81 00	13 x 20 cm	5	25
20 01 00	13 X ZU CIII	3	23

Steril – einzeln verpackt

Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 36.

# Mepilex<sup>®</sup> Lite









### Dünner Schaumverband

Mepilex Lite ist ein dünner Schaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht exsudierender Wunden und zum Schutz gefährderter Haut.



### Ergänzungsprodukt zur Fixierung:



### Beispiele für Anwendungsgebiete



### Vorteile

- extrem weich und anpassungsfähig
- Schutz während der Strahlentherapie
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- leicht exsudierende Wunden
- chronische Wunden, wie z.B. diabetisches Fußsyndrom
- strahleninduzierte Hautschäden
- Hautschutz

### Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



### Bestellinformationen

### Home Care

ArtNr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
28 40 10	7,5 x 8,5 cm	03 64 24 43	5	70
28 41 10	12,5 x 12,5 cm	03 64 27 27	5	50
28 43 10	17,5 x 17,5 cm	03 64 27 79	5	35
28 45 00	20 x 50 cm	09 89 16 96	4	24

Steril – einzeln verpackt

### Klinik

ArtNr.	Größe	Stück/Packung	Stück/Karton
28 40 00	6 x 8,5 cm	5	70
28 41 00	10 x 10 cm	5	50
28 43 00	15 x 15 cm	5	50
28 45 00	20 x 50 cm	4	24

# Mepilex® Border Flex









### Flexibler selbsthaftender Schaumverband

Mepilex Border Flex ist ein äußerst flexibler Schaumverband mit Haftrand zur Versorgung einer Vielzahl von Wunden.




### Vorteile

- Flexibilität sorgt für eine sichere und lange Haftung 5,6,7
- schnelle und sichere Aufnahme aller Exsudatarten auch visköses Exsudat <sup>1,2,3</sup>
- sicherer Einschluss von Bakterien, für eine effektive Reduzierung der Bakterienlast in der Wunde.
- optimale Anpassungsfähigkeit

### Anwendungsgebiete

- mittelstark bis sehr stark exsudierende Wunden
- chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fußsyndrom, Dekubitus
- traumatische Wunden

### Weniger Verbandwechsel als andere – hält bis zu 7 Tage<sup>6,7</sup>

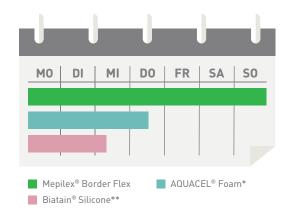


Getestet wurden die Produkte an besonders beweglichen Körperstellen. Wir sind überzeugt, was dort 7 Tage hält, haftet auch zuverlässig an allen anderen Körperstellen.



<sup>\*</sup> Testregion: Ellenbogen \*\* Testregion: Knie

<sup>1.</sup> Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Report no. PD-528871. Data on file. 2. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Spreading layer spreads fluid evenly across the surface. Report no. PD-528874. Data on file. 3. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Fluid handling capacity. Report no. PD-527642. Data on file. 4. Molnlycke Health Care. Mepilex Border Flex dressing and Mepilex Border dressing in wet condition. Report no. PD-530246. 18 January 2017. Data on file. 6. ProDerm. Assessment of wearing properties of wound dressings on the elbows. Report no. PD-535013. 22 August 2016. Data on file. 7. ProDerm. Assessment of wearing properties of wound dressings on the elbows. Report no. PD-535013. 22 August 2016. Data on file.

### Beispiele für Anwendungsgebiete

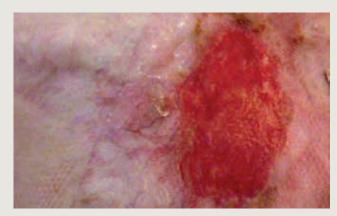

traumatische Wunden



Oberschenkelamputation



Versorgung mit Mepilex Border Flex



Produktaufbau von Mepilex Border Flex

### Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



### Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	Wundkissen cm²	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
59 52 11	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	20,25	12 59 59 84	10	50
59 53 11	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	42,25	12 59 60 09	10	70
59 50 11	12,5 x 12,5 cm	8,5 x 8,5 cm	72,25	12 59 60 15	10	80
59 54 11	15 x 15 cm	5 x 15 cm	121	12 59 60 21	10	50
59 56 11	15 x 20 cm	11 x 16 cm	176	12 59 60 38	10	120
58 35 00	7,8 x 10 cm	3,5 x 5,5 cm	15	14 41 21 43	5	40
58 33 00	13 x 16 cm	9 x 12 cm	85	14 41 21 95	5	70
58 34 00	15 x 19 cm	11,2 x 15,2 cm	134	14 41 22 03	5	45





ab Oktober 2019

# Mepilex® Border







### Selbsthaftender Schaumverband

Mepilex Border ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband zur Versorgung mittel bis stark exsudierender Wunden.





Mepilex Border reduziert klinisch erwiesen die Inzidenz von Dekubitusulzera.

### Vorteile

- hohes Absorptionsvermögen durch Superabsorber für längere Tragedauer
- hält Exsudat sicher im Verband auch unter Druck
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- mittelstark bis stark exsudierende Wunden
- chronische Wunden, z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fußsyndrom
- traumatische Wunden
- Dekubitusprophylaxe

Mepilex® Border Sacrum

Spezialform für den
Sakralbereich



### Mepilex® Border Heel Spezialform für die Ferse



### Beispiele für Anwendungsgebiete




Mepilex Border



Ulcus cruris mixtum



Dekubitus Gesäß

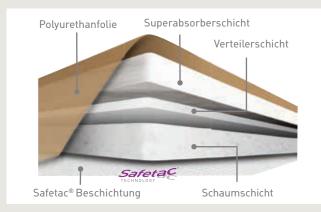

Produktaufbau von Mepilex Border

### Bestellinformationen Home Care

1101116 66	Tiome date						
ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton		
29 52 55	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	09 06 27 12	10	80		
29 53 55	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	09 06 27 29	10	70		
29 54 55	15 x 15 cm	11 x 11 cm	09 06 27 35	10	100		
29 56 55	15 x 20 cm	11 x 16 cm	09 06 27 41	10	120		
29 58 00	10 x 20 cm	5 x 15 cm	04 90 67 89	5	25		
29 59 00	10 x 30 cm	5 x 25 cm	05 01 82 52	5	25		
Mepilex Bor	der Sacrum (Hom	ie Care & Klinik)					
28 20 10	16 x 20 cm	120 cm <sup>2</sup>	12 49 60 70	10	50		
28 24 10	22 x 25 cm	240 cm <sup>2</sup>	12 49 60 87	10	30		
Mepilex Bor	Mepilex Border Heel (Home Care & Klinik)						
28 27 10	22 x 23 cm	189 cm <sup>2</sup>	12 49 60 93	10	30		

### Klinik

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	Stück/Packung	Stück/Karton
29 52 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	5	70
29 53 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	5	50
29 54 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	5	50
29 56 00	15 x 20 cm	11 x 16 cm	5	45
29 58 00	10 x 20 cm	5 x 15 cm	5	25
29 59 00	10 x 30 cm	5 x 25 cm	5	25

Steril – einzeln verpackt

### Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



# Mepilex® Border Lite










### Dünner, selbsthaftender Schaumverband

Mepilex Border Lite ist ein dünner, selbsthaftender Schaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht exsudierender Wunden.

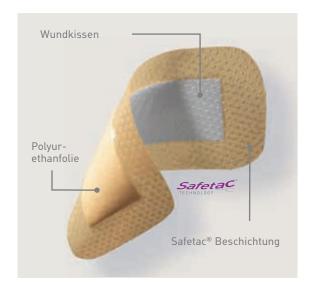

### Beispiele für Anwendungsgebiete



### Vorteile

- sanft und anpassungsfähig
- gute und sichere Haftung
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- nicht bis leicht exsudierende Wunden
- chronische Wunden, z.B. diabetisches Fußsyndrom
- traumatische Wunden, z.B. Schnittund Schürfwunden
- epithelisierende Wunden

### Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
28 10 00	4 x 5 cm	2 x 3 cm	01 01 85 97	10	70
28 11 00	5 x 12,5 cm	2,5 x 8,5 cm	01 01 86 11	5	65
28 12 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	01 01 86 34	5	70
28 13 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	01 01 86 57	5	50
28 15 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	01 01 86 86	5	50

Steril – einzeln verpackt

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



# Mextra® Superabsorbent





### Superabsorbierender Wundverband

Mextra Superabsorbent ist ein superabsorbierender Verband, der Wundexsudat über die Wundkontaktschicht absorbiert und zuverlässig in seinem Kern festhält.



# Wundkontaktauflagen, wie z.B. Mepilex® Transfer Ag Mepitel® | Mepitel® One Exufiber® Ergänzungsprodukte zur Fixierung Wundkontaktauflagen, wie z.B. Mepilex® Transfer Ag Mepitel® One Tubifast® 2-WAYSTREETCH®

### Vorteile

- hohes Rückhaltevermögen und Absorptionskapazität
- sanft und anpassungsfähig
- schützt den Wundumgebungsbereich

### Anwendungsgebiete

- stark bis sehr stark exsudierende Wunden
- chronische Wunden, wie z.B. Ulcus cruris, Dekubitus
- Wunden in der Reinigungsphase
- Tumorwunden

### Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Informationen zu Mepilex Transfer erhalten Sie auf Seite 30, zu Mepilex Transfer Ag auf Seite 22, zu Mepitel und Mepitel One auf Seite 26, zu Exufiber auf Seite 32. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 36.

### Bestellinformationen

### Home Care

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
61 00 00	12,5 x 12,5 cm	9,5 x 9,5 cm	12 51 30 87	10	50
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	9,5 x 14,5 cm	12 51 31 01	10	40
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	9,5 x 19,5 cm	12 51 31 18	10	90
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	14,5 x 19,5 cm	12 51 31 24	10	40
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	19,5 x 24,5 cm	12 51 31 53	10	40
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	19,5 x 29,5 cm	12 51 31 76	10	50
61 06 00	22,5 x 42,5 cm	19,5 x 39,5 cm	12 51 31 82	10	50

Steril – einzeln verpackt

### Klinik

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	Stück/ Packung	Stück/ Karton
61 07 00	10 x 10 cm	7 x 7 cm	10	50
61 07 10	10 x 15 cm	7 x 12 cm	10	40
61 07 20	10 x 20 cm	7 x 17 cm	10	90
61 07 30	15 x 20 cm	12 x 17 cm	10	40
61 07 40	20 x 25 cm	17 x 22 cm	10	40
61 07 50	20 x 30 cm	17 x 27 cm	10	50
61 07 60	20 x 40 cm	17 x 37 cm	10	50

# Mepilex® Border Post-Op

### Selbsthaftender, flexibler Komplettverband für chirurgische Wunden









Mepilex Border Post-Op ist ein flexibler Komplettverband für chirurgische Wunden, der Exsudat sehr effektiv absorbiert und zurückhält.



### Zwei randomisierte Studien<sup>1,2</sup> Eine prospektive Studie<sup>3</sup> Eine Beobachtungsstudie<sup>4</sup>

Vier unabhängige Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Patienten, die mit Mepilex Border Post-Op behandelt wurden, **keine Anzeichen von Blasenbildung oder Hautschäden zeigten.** 

### Vorteile

- überlegenes Exsudatmanagement dank Rückhalteschicht für weniger Verbandwechsel
- flexibles Flex-Cut Wundkissen, in alle Richtungen dehnbar
- duschfeste und atmungsaktive Außenfolie
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- mittel bis stark exsudierende Wunden
- chirurgische Wunden, wie z.B. nach Eingriffen an Knie, Hüfte oder Thorax oder Kaiserschnitten.

<sup>1.</sup> Van Overschelde, P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 2. Bredow, J et al. Randomized clinical trial to evaluate performance of fl exible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 3. Zarghooni K. et al. Effect of a modern dressing compared to standard dressings on outcome after primary hip and knee arthroplasty: a prospective, non-randomised controlled study. E-poster presentation at EWMA, 2015. 4. Johansson C. et al. Preventing post-operative blisters following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012.

### Beispiele für Anwendungsgebiete



Mepilex® Border Post-Op am Knie



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.

chirurgische Wunde

### Bestellinformationen

### Home Care

iai seemisi	
25.00	2
12 83 A	Κ.
	ĭ.

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
49 61 00	6 x 8 cm	3 x 5 cm	11 63 91 13	10	80
49 62 00	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	11 63 91 36	10	70
49 63 00	10 x 15 cm	4,5 x 10 cm	11 63 91 42	10	100
49 64 05	10 x 20 cm	4,5 x 14,5 cm	11 63 91 59	5	25
49 64 55	10 x 25 cm	4,5 x 19,5 cm	11 63 91 65	5	30
49 66 05	10 x 30 cm	4,5 x 24 cm	11 63 91 71	5	25
49 66 50	10 x 35 cm	4,5 x 29 cm	11 63 91 88	5	55

Steril – einzeln verpackt

### Klinik

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	Stück/Packung	Stück/Karton
49 61 00	6 x 8 cm	3 x 5 cm	10	80
49 62 00	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	10	70
49 63 00	10 x 15 cm	4,5 x 10 cm	10	100
49 64 00	10 x 20 cm	4,5 x 14,5 cm	10	120
49 64 50	10 x 25 cm	4,5 x 19,5 cm	10	60
49 66 00	10 x 30 cm	4,5 x 24 cm	10	40
49 66 50	10 x 35 cm	4,5 x 29 cm	5	55

Steril – einzeln verpackt

### Die sichere Lösung für infizierte Wunden



In über 80 internationalen Studien und Erhebungen wurde erkannt und bestätigt, dass Verbände mit Safetac® Technologie die Lebensqualität der Patienten erhöhen.

Eine große veröffentlichte Beobachtungsstudie aus Frankreich bestätigt noch einmal die Wirksamkeit der Mepilex Ag Verbände mit Silber. Im Mittelpunkt der 794 Patienten-Fallstudien aus dem niedergelassenen Bereich stand die Infektionsund Heilungsrate. Signifikante Verbesserungen konnten belegt werden. Die antimikrobiellen Verbände von Mölnlycke beinhalten Silbersulfat. Sobald der Verband mit Exsudat in Berührung kommt, werden Silberionen freigesetzt, die wundspezifische Erreger innerhalb 30 Minuten bis zu 7 bzw. 14 Tage (Mepilex Transfer Ag) effektiv inaktiviert. 1,2,3

### Tipps und Tricks für die Anwendung von Silber

Verwenden Sie Verbände mit Silber bei ersten Anzeichen einer Infektion. In Einzelfällen, in der Sie eine Prophylaxe wünschen, ist die Anwendung auch möglich. Wir empfehlen den 2 Wochen-Check: Nach 2 Wochen sollten Sie den Therapieerfolg prüfen. Verbände mit Silber sind für die Kurzzeitanwendung von bis zu 4 Wochen gedacht. Danach sollte ein Arzt erneut zur Beurteilung herangezogen werden. Ein Entfernen von Wundbelägen (mechanisch oder chirurgisch) ist wichtig für den Therapieerfolg.

### Wussten Sie, dass...

- auch MRSA Infektionen mit unseren Produkten erfolgreich behandelt werden können?
- Verbrennungen bis Grad 2a in der Regel mit 2 bis 3 Verbandwechseln zur Abheilung kommen?
- die Anzahl der Verbandwechsel durch hochabsorbierende Wundauflagen deutlich reduziert werden können?
- die Wundexsudation im Laufe der Behandlung aufgrund der Keimreduktion nachlässt?

### Referenzen

1. Rickets C R et al. Mechanism of Prophylaxis by Silver Compounds against infection of Burns. British Medical Journal, 1970. 2. Werthén M et al. Effect of silver dressings on Pseudomonas aeruginosa biofilm in an in vitro wound infection model. Poster presentation at 2010 EWMA Conference, Geneva 2010. 3. Werthén M, Henriksson L, Jensen Østrup P, Sternberg C, Givskov M, Bjarnsholt T. An in vitro model of bacterial infections in wounds and other soft tissues. APMIS Silverstein P et al. Soft silicone dressing with silver versus silver sulfadiazine cream in the treatment of partialthickness burns: a randomised controlled trial. Poster presentation at the European Wound Management Association conference, Geneva, Switzerland, 2010. 5. Meuleneire F. An observational study of the use of a soft silicone silver dressing on a variety of wound types. J Wound Care 2008. 6. Clinicians' rationale for using a silver dressing: results of a French observational survey Journal of Wound Care 2012; 21[12]: 620-625 Truchetet, F., Guibon, O., Meaume, S. 2010.

# Mepilex® Border Ag









### Selbsthaftender, antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Mepilex Border Ag ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Komplettverband mit Silbersulfat zur Versorgung kritisch kolonisierter und infizierter oberflächlicher Wunden.



### Vorteile

- verträgliche und verordnungsfähige Silberverbindungen (Silbersulfat)
- schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 7 Tage) antimikrobielle Wirkung
- hohes Absorptionsvermögen für weniger Verbandwechsel
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- mittel bis stark exsudierende Wunden
- infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Verbrennungen bis Grad 2a
- chronische Wunden, wie z.B. Dekubitus, Ulcus cruris, diabetisches Fußsyndrom

### Beispiele für Anwendungsgebiete



Mepilex<sup>®</sup> Border Sacrum Ag Spezialform für den Sakralbereich



### Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

	ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
	39 52 60	7 x 7,5 cm	4 x 4,5 cm	01 41 04 38	5	70
	39 53 60	10 x 12,5 cm	6,5 x 8,5 cm	01 41 69 49	5	50
	39 54 60	15 x 17,5 cm	11 x 13 cm	01 41 69 78	5	35
	39 56 60	17 x 20 cm	12 x 16 cm	01 43 22 91	5	40
	39 58 00	10 x 20 cm	6 x 16 cm	06 13 03 99	5	35
	39 57 00	10 x 25 cm	5 x 20 cm	06 13 04 07	5	35
	39 59 00	10 x 30 cm	5 x 25 cm	06 13 04 13	5	25
Mepilex Border Sacrum Ag						
	38 20 00	18 x 18 cm	120 cm <sup>2</sup>	06 13 04 36	5	40
	38 22 00	20 x 20 cm	162 cm²	06 13 04 42	5	40
	38 24 00	23 x 23 cm	239 cm <sup>2</sup>	06 13 04 59	5	25

Steril – einzeln verpackt

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



# Exufiber® Ag+







### Antimikrobieller, gelbildender Faserverband

Exufiber Ag+ ist ein gelbildender Faserverband mit Hydrolock® Technologie inkl. Silber und besteht aus hoch absorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA). Bei Kontakt mit Exsudat geliert der Faserverband und passt sich sanft ans Wundbett an.<sup>1,2</sup>



### Ergänzungsprodukte



### Vorteile

- hohe Nassreißfestigkeit ermöglicht den Verbandwechsel in einem Stück<sup>3,4</sup>
- absorbiert und schließt Exsudat, Bakterien und Blut sicher ein 4-8
- hohe Retentionsrate verhindert Leckagen und Mazeration <sup>4,5</sup>
- kontrollierte Freisetzung von Silberionen bei Kontakt mit Wundflüssigkeit, die bis zu sieben Tage lang antimikrobiell wirken (in vitro) 9


### Anwendungsgebiete

- mittel bis stark exudierende Wunden
- Ulcus cruris. diabetisches Fußulcus
- infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko

1. Davies P, McCarty S. An in-use product evaluation of a gelling fibre dressing in wound management. E-poster presentation at Wounds UK Conference, 2017, Harrogate, United Kingdom. 2. Lev-Tov et al. An interim analysis of clinical investigation to evaluate exudate management and comfort of use of an antimicrobial gelling fibre dressing\* in medium to highly exudative wounds. Poster presented at the Symposium of Advanced Wound Care, Fall meeting 2018, Las Vegas, NV, USA. 3. Mölnlycke Health Care Laboratory Report PD-521248 (unpublished). 4. Mölnlycke Health Care Laboratory Report PD-521232 (unpublished). 5. Mölnlycke Health Care Laboratory Report PD-521232 (unpublished). 8. Mölnlycke Health Care Laboratory Report PD-521235 (unpublished). 9. Hamberg K et al. Antimicrobial effect of a new silver-containing gelling fibre dressing against common wound pathogens. Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/Wound Healing Society (WHS) Annual Meeting 2017, Apr 05-09, 2017, San Diego, CA, USA. 10. Mölnlycke Health Care Laboratory Report PD-522298 (unpublished). 11. Gill 2 et al. 2017. Evaluation of a Gelling Fiber Dressing with Silver to Eliminate MRSA Biofilm Infections and Enhance the Healing. Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/ Vound Healing Society (WHS) Annual Meeting 2017, Apr 05-09, 2017, San Diego, CA, USA. 10. Molnlycke Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/ Vound Meeting 2017, Apr 05-09, 2017, San Diego, CA, USA. 10. Molnlycke Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/ Vound Meeting 2017, Apr 05-09, 2017, San Diego, CA, USA. 10. Molnlycke Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/ Vound Meeting 2017, Apr 05-09, 2017, San Diego, CA, USA. 10. Molnlycke Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/ Vound Meeting 2017, Apr 05-09, 2017, San Diego, CA, USA. 10. Molnlycke Poster Poster Poster Poster Poster Poster Poster Poster Poster

### Beispiele für Anwendungsgebiete



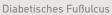



Belegte Wunde

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



### Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
60 34 01	5 x 5 cm	14 02 16 03	10	40
60 34 02	10 x 10 cm	14 02 16 32	10	60
60 34 03	15 x 15 cm	14 02 16 49	10	60
60 34 04	4,5 x 10 cm	14 03 93 59	10	40
60 34 05	4,5 x 20 cm	14 03 93 65	10	50
60 34 06	4,5 x 30 cm	14 03 93 71	10	60
60 34 07	20 x 30 cm	14 02 16 55	5	40
Tamponade				
60 34 00	2 x 45 cm	14 02 15 95	5	40

Steril – einzeln verpackt

# Mepilex® Transfer Ag









### Drainagefähiger, antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Mepilex Transfer Ag ist ein drainagefähiger Schaumverband mit Silbersulfat zur Versorgung von kritisch kolonisierten und infizierten Wunden, die leicht bis stark exsudieren. Das Exsudat wird in den Sekundärverband weitergeleitet.



### Vorteile

- verträgliche und verordnungsfähige Silberverbindungen (Silbersulfat)
- schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 14 Tage) antimikrobielle Wirkung
- schnelle Aufnahme und Weiterleitung von Exsudat
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- leicht bis sehr stark exsudierende Wunden
- infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- Verbrennungen bis Grad 2a
- chronische Wunden, wie z.B. diabetisches Fußsyndrom, Ulcus cruris, Dekubitus
- Hautentnahmestellen

### Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Informationen zum Sekundärverband Mextra Superabsorbent erhalten Sie auf Seite 15. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 36.



### Beispiele für Anwendungsgebiete



### Bestellinformationen

### Home Care

ArtNr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	09 54 27 77	10	70
39 41 00	10 x 12,5 cm	09 54 27 83	5	50
39 48 00	15 x 20 cm	09 54 28 14	10	50
39 45 00	20 x 50 cm	09 54 28 20	2	12

Steril - einzeln verpackt

### Klinik

ArtNr.	Größe	Stück/Packung	Stück/Karton
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	10	70
39 47 00	12,5 x 12,5 cm	5	50
39 48 00	15 x 20 cm	10	50
39 45 00	20 x 50 cm	2	12

# Melgisorb<sup>®</sup>Ag







### Antimikrobieller Alginatverband

Melgisorb Ag ist ein absorbierender, antimikrobieller Kalzium-Alginatverband zur Versorgung von kritisch kolonisierten und infizierten oberflächlichen sowie tiefen Wunden.



Vorteile

- hohes Absorptionsvermögen
- hohe Strukturstabilität für eine rückstandsarme Entfernung
- schnelle und anhaltende antimikrobielle Wirkung

### Anwendungsgebiete

- mittel bis stark exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, Diabetisches Fußsyndrom
- Hautentnahmestellen
- traumatische Wunden
- Verbrennungen bis Grad 2a

### Ergänzungsprodukte zur Exsudataufnahme



### Beispiele für Anwendungsgebiete



### Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Kompressen				
25 60 55	5 x 5 cm	01 56 08 24	10	100
25 61 05	10 x 10 cm	01 56 08 30	10	100
25 61 55	15 x 15 cm	01 56 08 47	10	100
Tamponade				
25 66 05	3 x 44 cm	01 56 09 59	10	100

Steril – einzeln verpackt

Informationen zu Mepilex Border Flex erhalten Sie auf Seite 10, zu Mextra Superabsorbent auf Seite 15. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 36.

# Mepilex<sup>®</sup> Ag










### Antimikrobieller Schaumverband mit Silber

Mepilex Ag ist ein antimikrobieller Schaumverband mit Silbersulfat, zur Versorgung kritisch kolonisierter und infizierter, oberflächlicher Wunden.

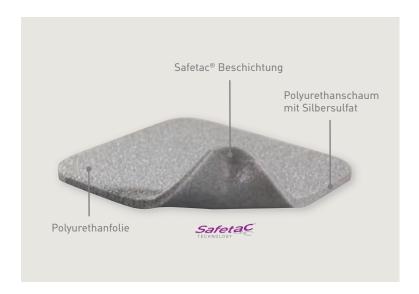

### Ergänzungsprodukt zur Fixierung:



### Vorteile

- verträgliche und verordnungsfähige Silberverbindungen (Silbersulfat)
- schnelle (30 Min.) und lang anhaltende (bis 7 Tage) antimikrobielle Wirkung
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel


### Anwendungsgebiete

- leicht bis mittelstark exsudierende Wunden
- infizierte Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko
- chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, diabetisches Fußsyndrom, Dekubitus
- Verbrennungen bis Grad 2a

### Beispiele für Anwendungsgebiete



Ulcus cruris mixtum

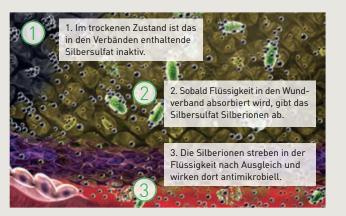

Funktionsweise von Mepilex Ag

### Bestellinformationen

### Home Care

ArtNr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton		
28 70 50	10 x 10 cm	09 06 26 81	10	80		
28 72 10	10 x 20 cm	02 22 72 39	5	45		
28 73 10	15 x 15 cm	02 22 72 74	5	25		
28 74 10	20 x 20 cm	02 23 09 68	5	20		
28 75 10	20 x 50 cm	01 23 54 61	2	12		
Mepilex Heel	Mepilex Heel Ag					
38 81 00	13 x 20 cm	06 57 49 20	5	25		
38 83 00	15 x 22 cm	06 57 49 43	5	30		

Steril – einzeln verpackt

### Klinik

ArtNr.	Größe	Stück/Packung	Stück/Karton		
28 71 10	10 x 10 cm	5	70		
28 72 10	10 x 20 cm	5	45		
28 73 10	15 x 15 cm	5	25		
28 74 10	20 x 20 cm	5	20		
28 75 10	20 x 50 cm	2	12		
Mepilex Heel Ag					
38 81 00	13 x 20 cm	5	25		
38 83 00	15 x 22 cm	5	30		

Steril – einzeln verpackt

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



# Mepitel® & Mepitel® One

### Beidseitig & einseitig beschichtete Wundkontaktauflage

Mepitel® und Mepitel® One mit Safetac® Technologie sind Wunddistanzgitter, die für das Management einer Vielzahl exsudierender Wunden geeignet sind. Es kann auch als Hautschutz auf nicht exsudierenden Wunden und empfindlichen Hautarealen verwendet werden.

# Bis zu 14 Tage ungestörte Wundheilung und weniger Schmerzen beim Verbandwechsel





Klinische Evidenz -

für mehr Sicherheit!

### Die Vorteile auf einen Blick:



Keine Rückstände und Aufrecht- erhaltung funktioneller Eigensch. bis zu 14 Tagen <sup>1-6</sup>



Sehr guter Exsudattransfer und topische Anwendung von Substanzen



Wundbegutachtung ohne Verbandwechsel möglich



Gute Wundheilungstendenz

### Anwendungsgebiete

- nicht bis stark exsudierende Wunden
- chronische Wunden
- traumatische Wunden wie Hautrisse, Abschürfungen
- Verbrennungen Grad 2a
- Hautentnahmestellen

### Kombinationsmöglichkeit





Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video Mepitel.



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video Mepitel One.



### **Mepitel**®

### Bestellinformationen

### Home Care

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 05 00	5 x 7 cm	02 81 84 43	5	25
29 07 00	8 x 10 cm	02 81 84 72	5	50
29 10 00	12 x 15 cm	02 81 85 03	5	60
29 20 05	20 x 30 cm	04 66 04 72	5	30

Steril – einzeln verpackt

### Klinik

ArtNr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 05 10	5 x 7,5 cm	10	50
29 07 10	7,5 x 10 cm	10	40
29 10 10	10 x 18 cm	10	70
29 20 05	20 x 30 cm	5	30

Steril – einzeln verpackt

### Mepitel® One

### Bestellinformationen

### Home Care

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton		
28 91 00	5 x 7,5 cm	03 08 97 27	10	70		
28 91 00	5 x 7,5 cm	06 90 99 87	70*			
28 93 00	7,5 x 10 cm	03 09 00 15	10	40		
28 93 00	7,5 x 10 cm	06 90 99 93	40**			
28 95 00	10 x 18 cm	09 50 47 59	10	70		
28 97 00	17 x 25 cm	09 50 84 50	5	40		
28 97 50	27,5 x 50 cm	11 02 88 46	2	14		
Mepitel One (auf Rolle)						

Steril – einzeln verpackt

28 98 00 9,5 x 150 cm 10 70 89 64

### Klinik

ArtNr.	Größe	Stück/Packung	Stück/Karton		
28 91 00	5 x 7,5 cm	10	70		
28 93 00	7,5 x 10 cm	10	40		
28 95 00	10 x 18 cm	10	70		
28 97 00	17 x 25 cm	5	40		
28 97 50	27,5 x 50 cm	2	14		
Mepitel One (auf Rolle)					
28 98 00	9,5 x 150 cm	1	9		

Steril – einzeln verpackt

Informationen zum Sekundärverband Mextra Superabsorbent erhalten Sie auf Seite 15. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 36.

# Mepitel® Film











### Hautschützender Folienverband

Mepitel Film ist ein sanfter, transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac Technologie für die Versorgung oberflächlicher Wunden und zum Hautschutz.

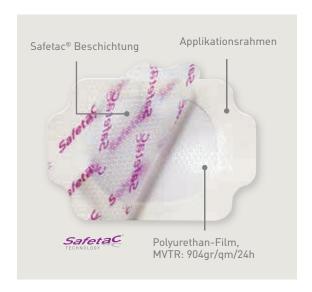

### Beispiele für Anwendungsgebiete

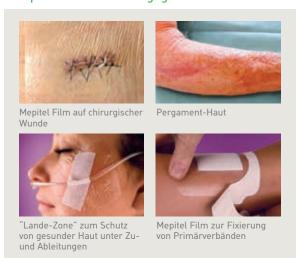

### Vorteile

- sichere und einfache Anwendung
- rückstandsloses Entfernen
- hautähnliches Gefühl
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- nicht exsudierende Wunden
- Dekubitus Kategorie 1 & 2
- Hautschutz bei empfindlicher Haut
- Prävention von strahleninduzierten Hautschäden

### Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
29 61 70	6 × 7 cm	04 10 73 38	10	50
29 62 70	10 × 12 cm	04 10 73 50	10	70
29 64 70	10 × 25 cm	04 10 73 73	10	50
29 66 70	15 × 20 cm	04 10 74 04	10	70

Steril – einzeln verpackt

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



# Mepore® Film







### Atmungsaktiver, transparenter Folienverband

Mepore Film ist ein selbstklebender, atmungsaktiver Folienverband zur Versorgung sauberer, epithelisierender Wunden.



# Bestellinformationen Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 06 70	6 x 7 cm	02 38 13 19	10	50
27 15 70	10 x 12 cm	02 38 13 31	10	70
27 25 70	10 x 25 cm	02 38 94 62	10	50
27 30 00	15 x 20 cm	02 39 11 40	10	50

Steril – einzeln verpackt

### Vorteile

- schützt vor Kontamination und Flüssigkeit
- sichere Fixierung
- einfache Anwendung dank Applikationsrahmen

### Anwendungsgebiete

- Abdeckung und Fixierung von Primärverbänden
- Wunden in der Epithelisierungsphase

# Mepore® Film Roll







### Unsteriler, transparenter Folienverband auf der Rolle

Mepore Film Roll ist ein unsteriler, selbstklebender, atmungsaktiver Folienverband, der sich ideal für die Fixierung von Verbänden, Schläuchen und Kanülen eignet.



### Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 61 05	5 cm x 10 m	05 54 35 73	1	24
27 61 10	10 cm x 10 m	05 54 35 96	1	12
27 61 15	15 cm x 10 m	05 54 36 04	1	8

Unsteril – im Spenderkarton

### Anwendungsgebiete

- Fixierung von Verbänden, Schläuchen und Kanülen
- Prävention vor Hautdegeneration

# **Mepilex**® Transfer









### Drainagefähiger Schaumverband

Mepilex Transfer ist ein dünner, durchlässiger Schaumverband zur Versorgung oberflächlicher, leicht bis sehr stark exsudierender Wunden. Der Verband leitet Exsudat zuverlässig in einen Sekundärverband weiter.



# Ergänzungsprodukt zur Exsudataufnahme Ergänzungsprodukt zur Fixierung Ergänzungsprodukt zur Fixierung Mextra® Superabsorbent Tubifast® 2-WAY STREETCH® 2-W

### Beispiele für Anwendungsgebiete



### Vorteile

- hohe Wirtschaftlichkeit besonders bei stark exsudierenden Wunden
- bei unterschiedlichen Exsudatmengen einsetzbar
- flexibel und anpassungsfähig
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

### Anwendungsgebiete

- leicht bis sehr stark exsudierende Wunden
- chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Gamaschenulcera
- Tumorwunden / exulzerierende Tumore
- strahleninduzierte Hautschäden
- Verbrennungen bis Grad 2a
- Epidermolysis Bullosa

### Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

ArtNr.	Gr	öße	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
29 47 00	10 x	12 cm	04 04 79 32	5	50
29 48 00	15 x	20 cm	02 52 35 41	5	40
29 45 02	20 x	50 cm	09 89 16 73	4	24

Steril – einzeln verpackt

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.



Informationen zum Sekundärverband Mextra Superabsorbent erhalten Sie auf Seite 15. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 36.

# Melgisorb® Plus







### Absorbierender Alginatverband

Absorbierender Kalzium-Natrium-Alginatverband zur Versorgung von exsudierenden, oberflächlichen und tiefen Wunden.



### Ergänzungsprodukte zur Exsudataufnahme



### Vorteile

- Exzellente Nass-Reißfestigkeit
- bildet ein Gel in Kontakt mit Wundflüssigkeit oder NaCl-haltigen Lösungen
- verklebt durch Vergelen nicht mit dem feuchten Wundbett

### Anwendungsgebiete

- mittel bis stark exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Fußsyndrom
- Hautentnahmestellen
- traumatische Wunden

Informationen zu Mepilex Border Flex erhalten Sie auf Seite 10, zu Mextra Superabsorbent auf Seite 15. Informationen zu Tubifast zur sicheren Fixierung erhalten Sie auf Seite 36.

### Beispiele für Anwendungsgebiete



### Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Kompressen				
25 20 00	5 x 5 cm	09 93 26 56	10	100
25 22 00	10 x 10 cm	09 93 26 62	10	100
25 25 00	10 x 20 cm	09 93 26 79	10	100
Tamponade				
25 35 00	3 x 45 cm	09 93 26 85	5	50

## **Exufiber**®









### Gelbildender Faserverband

Exufiber ist ein gelbildender Faserverband mit Hydrolock®-Technologie und besteht aus hoch absorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA) für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer exsudierender Wunden.



### Ergänzungsprodukte



### Vorteile

- überlegenes Rückhaltevermögen
- verbesserte Nassreißfestigkeit
- hohe Absorption von Exsudat, Blut und Bakterien
- weich und anschmiegsam, für eine einfache Handhabung

### Anwendungsgebiete

- stark exsudierende Wunden
- oberflächliche Wunden und Wundhöhlen
- chronische Wunden, z.B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetisches Fußsyndrom
- Verbrennungen Grad 2a
- Chirurgische Wunden
- Hautentnahmestellen

### Beispiele für Anwendungsgebiete



Dekubitus



Ulcus cruris venosum



Dekubitus



Wundhöhle nach postoperativer Nahtdehiszenz

### Bestellinformationen Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
Kompressen				
70 99 00	5 x 5 cm	14 02 16 61	10	40
70 99 01	10 x 10 cm	14 02 16 78	10	80
70 99 03	15 x 15 cm	14 02 16 84	10	60
70 99 04	20 x 30 cm	14 03 93 13	5	25
70 99 05	4,5 x 10 cm	14 03 93 36	10	40
70 99 06	4,5 x 20 cm	14 02 16 90	10	50
70 99 07	4,5 x 30 cm	14 03 93 42	10	60
Tamponade				
70 99 08	1 x 45 cm	14 02 17 15	5	25
70 99 09	2 x 45 cm	14 02 17 09	5	25

Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie zum Video.





# Mepore® Film & Pad







### Transparenter, absorbierender Wundverband



### Bestellinformationen Home Care

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 51 10	4 x 5 cm	1,5 x 2,5 cm	01 62 41 51	5	70
27 52 10	5 x 7 cm, oval	2,5 x 4 cm	01 62 91 48	5	70
27 53 10	5 x 7 cm, quadratisch	2,5 x 4 cm	01 62 41 80	5	70
27 54 10	9 x 10 cm	4,5 x 5 cm	01 65 05 04	5	50
27 55 10	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	01 65 05 10	5	50
27 56 10	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	01 65 05 27	5	40

Steril – einzeln verpackt

### Klinik

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 51 00	4 x 5 cm	1,5 x 2,5 cm	85	340
27 52 00	5 x 7 cm, oval	2,5 x 4 cm	85	340
27 53 00	5 x 7 cm, quadratisch	2,5 x 4 cm	85	340
27 54 00	9 x 10 cm	4,5 x 5 cm	30	180
27 55 00	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	30	240
27 56 00	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	30	240
27 57 00	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm	30	150
27 58 00	9 x 30 cm	4,5 x 25 cm	25	125
27 59 00	9 x 35 cm	4,5 x 30 cm	25	100

Steril – einzeln verpackt

# Mepore® Pro







### Wasserfester, selbstklebender Wundverband



Bestellinformationen Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
67 08 20	6 x 7 cm	3 x 4 cm	00 75 53 71	60	480
67 09 20	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	04 65 66 54	40	320
67 10 20	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	04 65 66 83	40	320
67 11 20	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	00 75 54 31	30	180
67 12 20	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm	00 75 54 54	30	210
67 13 20	9 x 30 cm	4,5 x 25 cm	00 75 54 77	30	270



### Selbstklebender, absorbierender Wundverband



### Bestellinformationen

Home Care steril – einzeln verpackt

	ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
NEU	67 20 00	5 x 7 cm	2 x 4 cm	12 97 87 80	60	480
	67 07 00	7 x 8 cm	4 x 5 cm	02 83 98 47	55	660
NEU	67 21 00	8 x 10 cm	3,5 x 6 cm	12 97 87 97	50	400
NEU	67 22 00	8 x 15 cm	3,5 x 10 cm	12 97 88 05	50	400
	67 11 00	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	03 13 74 03	30	180
	67 12 00	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm	03 13 74 32	30	210
	67 13 00	9 x 30 cm	5 x 25 cm	03 13 74 55	30	270
	67 14 00	9 x 35 cm	5 x 30 cm	03 85 27 32	30	180
	67 15 00	10 x 11 cm	6 x 6 cm	04 60 82 53	40	280
	67 16 00	11 x 15 cm	6 x 10 cm	04 60 82 76	40	280
	Rollen unstei	ril				
	33 19 00	4 cm x 5 m		03 13 7 478	1	24
	33 20 00	7 cm x 5 m		03 13 7 484	1	18

### Klinik steril – einzeln verpackt

	ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	Stück/ Packung	Stück/ Karton
NEU	67 20 00	5 x 7 cm	2 x 4 cm	60	480
	67 08 00	6 x 7 cm	3 x 4 cm	60	480
NEU	67 21 00	8 x 10 cm	3,5 x 6 cm	50	400
NEU	67 22 00	8 x 15 cm	3,5 x 10 cm	50	400
	67 09 00	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	50	400
	67 10 00	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	50	400
	67 11 00	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	30	180
	67 12 00	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm	30	180
	67 13 00	9 x 30 cm	5 x 25 cm	30	270
	67 14 00	9 x 35 cm	5 x 30 cm	30	180
	Rollen unsteril				
	33 19 00	4 cm x 5 m		1	24
	33 20 00	7 cm x 5 m		1	18

# Mepore IV



### Transparenter, atmungsaktiver Kanülenfixierverband



### Bestellinformationen Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 40 00	5,5 x 5 cm	02 38 10 35	100	600
27 42 00	8 x 9 cm	02 38 12 71	70	210
27 44 00	10 x 11 cm	02 38 12 94	70	210

# Tubifast® & Tubifast® Garments





### Elastischer Schlauchverband

Tubifast 2-Way Stretch ist ein elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband, der sich für die Sicherung von Primärverbänden, wie z.B. Mepilex, Mepilex Lite, Mextra Superabsorbent oder anderen medizinischen Produkten eignet.



### Vorteile

- Längs- und Querdehnbarkeit für sichere Fixierung
- gute Elastizität für ausreichende Bewegungsfreiheit

### Anwendungsgebiete


• Sicherung von Primärverbänden und anderen medizinischen Produkten

### Fasergehalt:

Viskose, Elastan, Polyamid

### Waschanleitung:



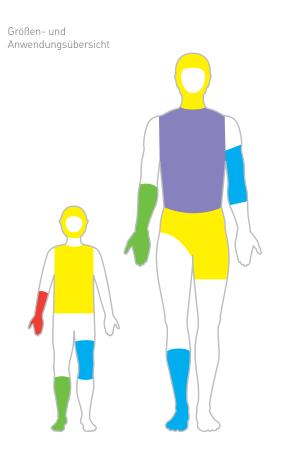

### Bestellinformationen Tubifast

ArtNr. Breite		Umfang Gliedmaße	PZN/ Packung	PZN/ Stück	Stück/ Karton			
Home	Home Care & Klinik							
10 m Länge								
24 34	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	09 93 26 91		1			
24 36	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	09 93 27 16		1			
24 38	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	09 93 27 39		1			
24 40	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	09 93 27 45		1			
24 44	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	09 93 27 68		1			

### Home Care


### 1 m Länge

24 80	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	09 93 277 4	00 14 35 38	12
24 81	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	09 93 27 80	09 93 28 28	12
24 82	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	09 93 27 97	09 93 28 34	12
24 83	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	09 93 28 05	09 93 28 40	12
24 79	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	09 93 28 11	09 93 28 57	12

Unsteril – 10 m-Produkte auf Rolle, 1 m-Produkte einzeln verpackt

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf. Die 1 m-Längen Tubifast sind auch einzeln verordnungs- und abgabefähig.

#### Beispiele für Anwendungsgebiete

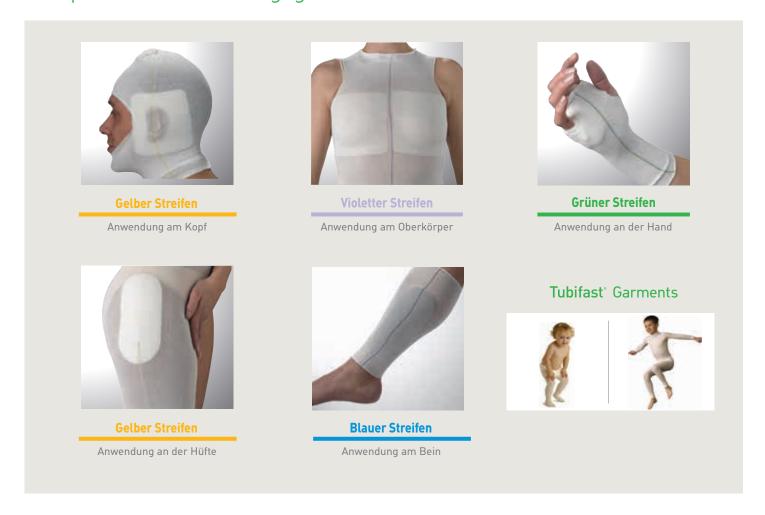

#### Bestellinformationen Tubifast Garments Home Care & Klinik

ArtNr.	Produkt/ Größe	PZN/ Stück	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
59 20	Handschuhe Erwachsene M/L (braun)	10 05 79 81	10 06 45 96	6*	42
59 21	Handschuhe Erw. S/M, Kind M/L (ab 10 Jahre - blau)	10 05 79 98	10 06 46 10	6*	42
59 23	Handschuhe Kind S (ca. 5-9 Jahre - rot)	10 05 80 12	10 06 46 56	6*	42
59 22	Handschuhe Kind XS (bis ca. 4 Jahre)	10 05 80 06	10 06 46 33	6*	42
99 20 07	Langärmliges Shirt mit integrierten Fäustlingen 6-24 Monate	10 05 80 29	10 06 46 62	6	30
99 20 08	Langärmliges Shirt 2-5 Jahre	10 05 80 35	10 06 46 79	6	30
99 20 09	Langärmliges Shirt 5-8 Jahre	10 05 80 41	10 06 47 16	6	30
99 20 10	Langärmliges Shirt 8-11 Jahre	10 05 80 58	10 06 47 22	6	30
99 20 11	Langärmliges Shirt 11-14 Jahre	10 05 80 64	10 06 47 39	6	30
99 20 12	Strumpfhose 6-24 Monate	10 05 80 70	10 06 47 45	6	30
99 20 13	Leggins 2-5 Jahre	10 05 80 87	10 06 47 51	6**	30
99 20 14	Leggins 5-8 Jahre	10 05 80 93	10 06 47 74	6**	30
99 20 15	Leggins 8-11 Jahre	10 05 81 01	10 06 47 80	6**	30
99 20 16	Leggins 11-14 Jahre	10 05 81 18	10 06 48 05	6**	30
99 20 17	Socken Einheitsgrößen 2-14 Jahre	10 05 81 24	10 06 48 28	6*	42

Die PZN ist nicht auf der Packung abgedruckt, aber in Ihrer Apotheken-Software hinterlegt.



Alter	Körper- größe cm	Innenbein- länge cm	Armlänge cm
6-24 Monate	74 - 86	38-34	25-29,5
2-5 Jahre	86-110	34 - 47	29,5-35,5
5-8 Jahre	110 - 128	47-58	35,5-42
8-11 Jahre	128 - 146	58 - 68	42-49
11-14 Jahre	146 - 164	68-77	49-57,5

<sup>\*</sup> entspricht 6 Paaren \*\* entspricht 1 Bündelpack mit 6 Einzelpackungen

## **Mepitac**®





#### Fixierverband

Mepitac ist die ideale und schonende Fixiermöglichkeit für Patienten mit empfindlicher und fragiler Haut.



#### Vorteile

- rückstandsfreies Entfernen
- sehr geringes Allergiepotential, atmungsaktiv und wasserabweisend
- atraumatischer und schmerzarmer Verhandwechsel

#### Beispiele für Anwendungsgebiete



#### Bestellinformationen Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 83 00	2 x 300 cm	03 88 58 49	1	12
29 84 00	4 x 150 cm	03 88 58 55	1	12

Unsteril – auf Rolle

#### Anwendungsgebiete

• Fixierung von z.B. Schläuchen, Verbänden, Sonden, Elektroden, IV Kanülen





#### Fixiervlies

Luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur Fixierung von Verbänden und /oder medizinischen Produkten.



#### Vorteile

 schonende Anwendung dank hautfreundlichem Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis

#### Bestellinformationen

#### Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
31 02 50	2,5 cm x 10 m	03 04 27 95	1	40
31 05 00	5 cm x 10 m	03 04 28 03	1	40
31 10 90	10 cm x 11 m	04 51 81 42	1	20
31 15 90	15 cm x 11 m	04 51 81 59	1	22
31 20 00	20 cm x 10 m	03 04 28 49	1	10
31 30 00	30 cm x 10 m	03 04 28 55	1	12

Unsteril – im Spenderkarton

#### Anwendungsgebiete


• Fixierung von Verbänden, Kompressen, Kathetern und Kanülen

## **Mepiform**®



#### Selbsthaftender Verband zur Narbenbehandlung

Mepiform ist ein dünner und komfortabler Verband mit Safetac Technologie, der zur Behandlung von alten und frischen hypertrophen Narben und Keloiden geeignet ist.

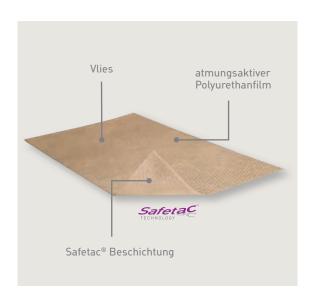

#### Beispiele für Anwendungsgebiete



#### Vorteile

- dünn und diskret
- einfache Anwendung
- für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet

#### Anwendungsgebiete

- geschlossene, saubere Wunden nach Entfernung von Nahtmaterial
- Reduzierung von alten und frischen, hypertrophen Narben und Keloiden
- zur Narbenvorbeugung



kann bis zu 7 Tagen auf der Narbe bleiben



UV Lichtschutzfaktor 5



klinisch geprüft<sup>1</sup>

**Referenz:** 1. Mustoe T.A. MD, et al, International Clinical Recommendations on Scar Management, Special Topic, 2002

#### Bestellinformationen Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
29 36 00	4 x 30 cm	00 08 91 87	5	50
29 37 00	5 x 7,5 cm	08 65 55 74	5	25
29 38 00	10 x 18 cm	08 65 55 97	5	35

einzeln verpackt

### Mesalt®



#### Trockene NaCl-Kompresse/-Tamponade

Mesalt ist eine imprägnierte Vliesstoffkompresse/-tamponade mit kristallinem Kochsalz zur Anregung der Wundexsudation und Förderung der natürlichen Wundreinigung, insbesondere bei belegten/infizierten Wunden. Als Sekundärverband eignet sich z.B. Mextra Superabsorbent.



#### Bestellinformationen Home Care & Klinik

ArtNr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Kompressen				
28 55 80	5 x 5 cm	07 73 35 10	30	240
28 57 80	7,5 x 7,5 cm	07 73 35 27	30	240
28 60 80	10 x 10 cm	07 73 35 33	30	180
Tamponade				
28 52 80	2 cm x 1 m	46 82 893	10	80

Steril – einzeln verpackt

## Mestopore®



#### Stomaverband

Selbstklebender, saugstarker Verband zur Versorgung kontinentem Stoma.



Bestellinformationen
Home Care & Klinik

	ArtNr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
	66 50 00	9 x 10 cm	5 x 5,5 cm	03 48 15 08	20	160	
Unsteril – im Karton							

#### **NOTIZEN**

## Mepilex® XT Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

Ferse





Zehenzwischenräume





Zeh





Finger und Zeh





Handzwischenräume





Ellbogen





Achsel





Ohr





Anwendung bei Schläuchen





## Mepilex® Border Lite Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

Finger 5 x 12,5 cm









Zeh 5 x 12,5 cm





Ferse 10 x 10 cm







Ellbogen 10 x 10 cm





Ohr 4 x 5 cm







# Mepilex® XT







Verbrühung































Mepilex Border Heel

Mepilex® Border Flex












Mepilex® Border Lite









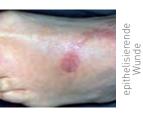

**Mepilex**® Ag











Diabetisches Fußsyndrom

Mepilex® Border Ag







ulcus cruris





ulcus cruris venosum

Mepitel<sup>®</sup>









Mepitel auf Haut-ent-nahmestelle













Hautriss


Mepitel® Film







Mepitel Film als "Lande-Zone" zum Schutz der gesunden Haut

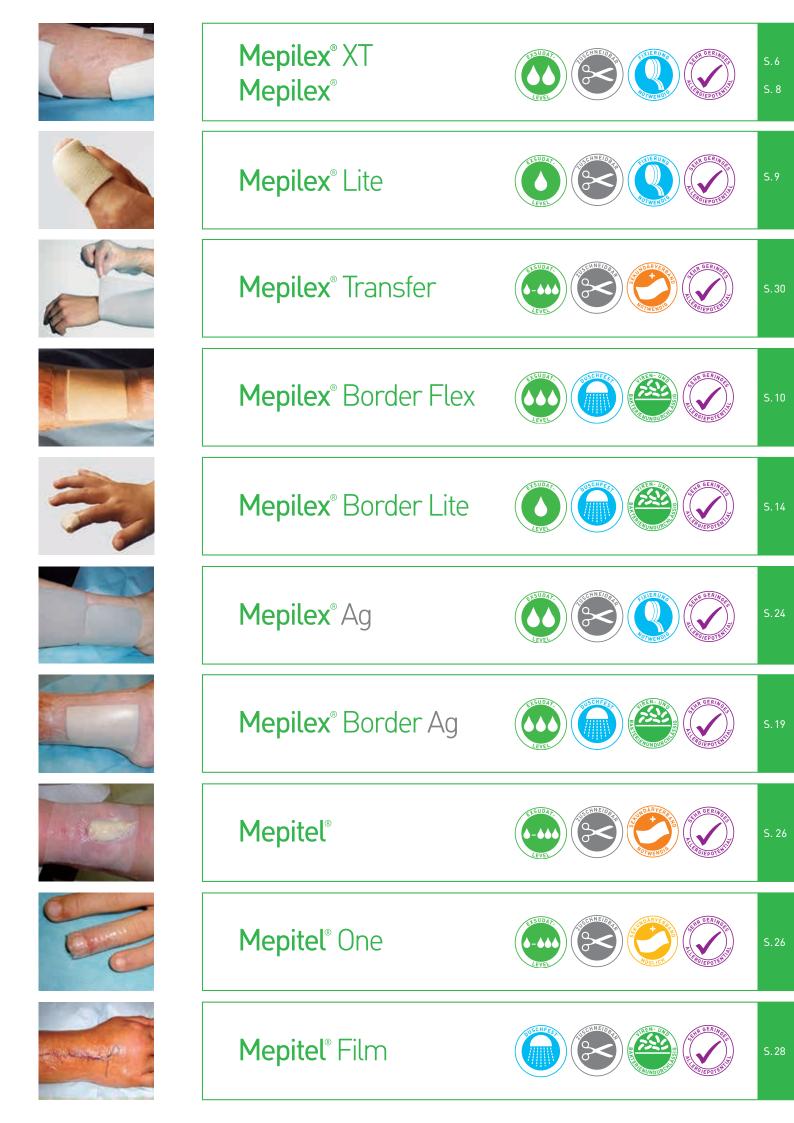

#### **NOTIZEN**

#### **NOTIZEN**

## Richtig verbunden mit dem **Wundassistenten**

#### Unsere App bietet bei der Wundversorgung Unterstützung für Fachpersonal

Wie finde ich schnell die passende Wundauflage? Mit dem Wundassistenten von Mölnlycke Health Care. Die kostenlose App erleichtert im Praxis- und Klinikalltag mit dem integrierten Konfigurator eine schnelle und unkomplizierte Versorgung von chronischen und akuten Wunden. Der Wundassistent vermittelt kurz und bündig Anwendungstipps sowie Produktinformationen und fördert so die effektive und zielgerichtete Behandlung der Patienten.

Laden Sie sich hier die App kostenlos herunter, indem Sie die QR Codes abscannen:







Besuchen Sie uns jetzt auch auf Facebook, Instagram und YouTube:













#### Kundenservice:

Tel.: 0800 / 186 21 81, Fax: 0800 / 186 08 77, Email: csc.de@molnlycke.com

#### Referenzauszug über die Wirksamkeit der Safetac® Technologie.

1. Price PE et al. Dressing-related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. IWJ 2008, 2. Principles of best practice: Minimising pain at wound dressing related procedures. A consensus document. London, 2004 3. Minimising pain at dressing-related procedures: "Implementation of pain relieving strategies". A consensus document Toronto, 2007. 4. Dykes PJ et al. Effect of adesive dressings on the stratum corneum of the skin. JWC 2001 5. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005 6. Wiberg A B et al. Preventing macertation with a soft silicone wound dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the World Union of Wound Healing Societies, Toronto, Canada, 2008. 7. Meaume S, et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Dressing in stage II pressure ulcers. OWM, 2003. 8. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. JWC 2007. 9. Zillmer R et al. Biophysical effects of repetitive removal of adhesive dressings on periulcer skin. JWC 2006. 10. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008. 11. K. Zarghooni et al., Effect of a Modern Dressing Compared to Standard Dressings on Outcome after Primary Hip and Knee Arthroplasty, Cologne, May 2015.

