

Mepilex®

Mousse absorbante de silicone molle Safetac®

Mousse absorbante

- Absorbe l'exsudat, favorise l'équilibre hydrique
- Agit sous compression
- Maintient son intégrité
- Épouse les formes
- Hydrophile, absorption maximale des liquides

Couche de silicone molle Safetac®

- N'adhère pas aux plaies humides
- Adhère délicatement à la peau sèche du pourtour
- S'enlève sans trauma ni douleur
- Minimise le risque de macération



Pellicule externe

- Perméable à la vapeur d'eau
- Maintient l'humidité et favorise l'équilibre hydrique
- Empêche l'écoulement de traverser le pansement

Safetac
TECHNOLOGIE

- Atraumatique pour la plaie et la peau péri-lésionnelle
- Absorbe bien l'exsudat, même sous compression
- Favorise un équilibre hydrique optimal et réduit la fréquence des pansements
- Scelle le pourtour de la plaie pour réduire le risque de macération

Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde¹⁻³.


*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

Safetac
TECHNOLOGIE

Mepilex[®]


Mölnlycke[®]

Application de Mepilex®

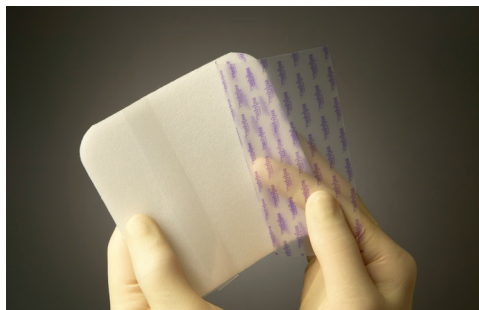


1. Nettoyer délicatement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Choisir un pansement qui déborde la plaie d'au moins 2 cm. Retirer la pellicule anti-adhérente.



2. Poser le côté adhésif sur la plaie, sans étirer. Pour panser les extrémités, poser Mepilex un peu plus bas que le centre de la plaie, pour éviter l'écoulement dû à la gravitation.



3. Fixer le pansement avec un ruban siliconé Mepitac, un ruban de tissu Mefix, un bandage compressif ou autre produit de fixation.

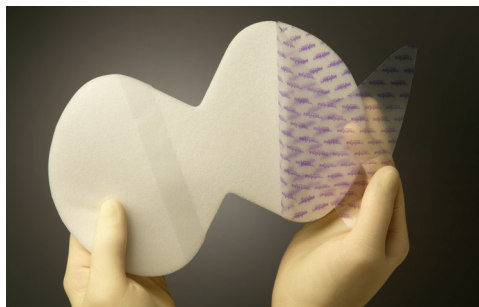

4. Nettoyer délicatement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Mepilex® Heel doit déborder la plaie d'au moins 2 cm. Retirer la portion plus longue de la pellicule anti-adhérente.



5. Fixer le pansement sous le pied. Retirer la portion courte de la pellicule et mouler le pansement autour du talon pour rapprocher les bords.



6. Pour fixer solidement Mepilex® Heel, utiliser un bandage tubulaire léger comme Tubifast, ou avec Mepore Film ou Mefix.

Mode d'action de Mepilex®

Mepilex® absorbe bien l'exsudat et minimise le risque de macération. Il entretient un milieu humide propice à la cicatrisation de la plaie. Les propriétés de Safetac® permettent de renouveler le pansement sans endommager la plaie ou la peau et sans douleur pour le patient.

Avantages de Mepilex®

- S'enlève sans endommager la plaie et la peau
- Peut demeurer en place jusqu'à 7 jours
- Confortable
- Peut être coupé aux dimensions requises

Sélection Mepilex®

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12

Sélection Mepilex® Heel

288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30

Indications*

Mepilex® est conçu pour le traitement de nombreuses plaies exsudatives telles que les escarres, les ulcères de pieds et de jambes et les plaies traumatiques (déchirures cutanées) et secondaires.

Précautions d'emploi*

- Si des signes d'infection apparaissent, consulter un professionnel de santé qui prescrira le traitement anti-infectieux indiqué. Ne pas utiliser Mepilex® avec des agents oxydants tels que les solutions d'hypochlorure et le peroxyde d'hydrogène. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Mepilex® doit être conservé dans un endroit sec, à une température intérieure à 35° C (95° F).
- Stérile. Ne pas utiliser si (emballage intérieur est ouvert ou endommagé avant l'utilisation. Ne pas restériliser.



*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca