

Mepilex® Lite


Mousse siliconée Safetac®,
mince et absorbante

Coussinet de mousse mince

- Absorbe l'exsudat
- Épouse les formes
- Conserve son intégrité

Couche de silicone molle Safetac®

- N'adhère pas aux plaies humides
- Adhère délicatement à la peau péri-lésionnelle
- S'enlève sans trauma ni douleur
- Protège contre la macération

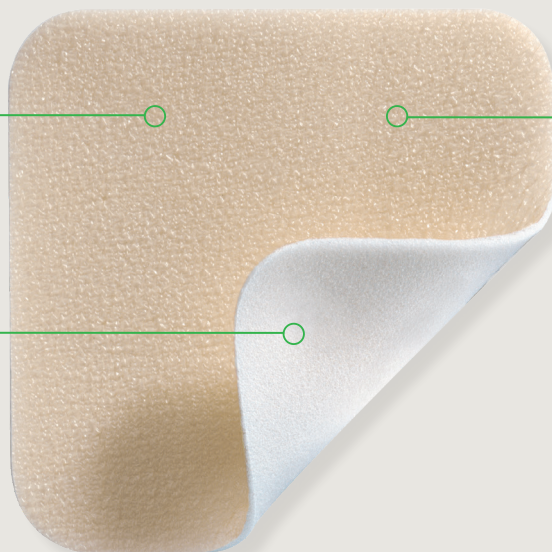

Pellicule externe

- Perméable à la vapeur d'eau
- Imperméable aux liquides
- Maintient l'humidité de la plaie

SafetaC
TECHNOLOGIE

- Atraumatique pour la plaie et la peau péri-lésionnelle
- Mince, souple et absorbante
- Scelle le pourtour de la plaie pour réduire le risque de macération

Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde¹⁻³.


*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

SafetaC
TECHNOLOGIE

Mepilex® Lite


Mölnlycke®


Application de Mepilex® Lite

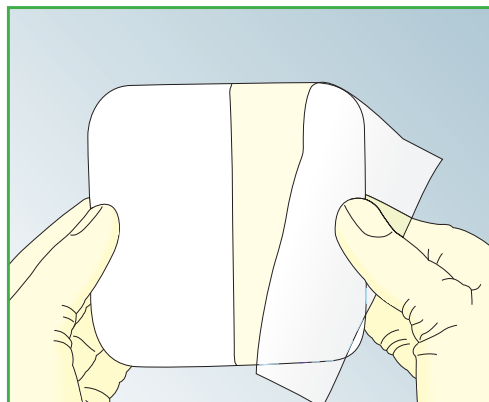

1. Nettoyer délicatement la plaie ; assécher la peau péri-lésionnelle. Choisir un pansement assez grand pour déborder la plaie de 2 cm.



2. Retirer une partie de la pellicule antiadhérente et poser Mepilex® Lite à côté de la plaie. Ne pas étirer. Retirer le reste de la pellicule et lisser délicatement sur la plaie.

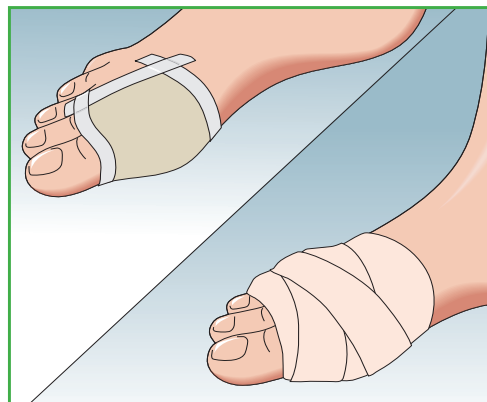

3. Fixer le pansement avec du ruban siliconé Mepitac® ou couvrir d'un bandage non adhésif comme Tubifast®.

Mode d'action de Mepilex® Lite

Mepilex® Lite est une mousse siliconée très souple et mince qui absorbe de petites quantités d'exsudats. La couche Safetac® scelle le pourtour de la plaie pour éviter la macération et assurer le renouvellement indolore des pansements. Mepilex® Lite peut être coupé aux dimensions requises.

Indications*

Mepilex® Lite est indiqué pour le traitement de nombreuses plaies non ou faiblement exsudatives telles que les ulcères de pied et de jambe, les escarres, les brûlures superficielles, les réactions cutanées secondaires à la radiothérapie et bulleuse. Mepilex® Lite peut aussi être utilisé comme un pansement de protection, notamment sur peau lésée et/ou fragilisée.

Sélection Mepilex® Lite

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
284000	6 x 8,5	5	70
284100	10 x 10	5	50
284300	15 x 15	5	50
284500	20 x 50	4	24

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca

Avantages de Mepilex® Lite

- Atraumatique pour la plaie et la peau péri-lésionnelle
- Minimise le trauma et la douleur associés au renouvellement du pansement
- Minimise le risque de macération
- Épouse bien les formes du corps
- Mince et confortable
- Facile à poser
- Entretient l'humidité de la plaie

Précautions*

- Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue au pansement ou à l'un de ses composants.
- En présence de signes cliniques d'une infection, consulter un professionnel de santé qui prescrira le traitement anti-infectieux adapté.
- Ne pas utiliser Mepilex® Lite avec des agents oxydants tels que les solutions d'hypochlorite et le peroxyde d'hydrogène.

