



Trokar mit geschützter Klinge

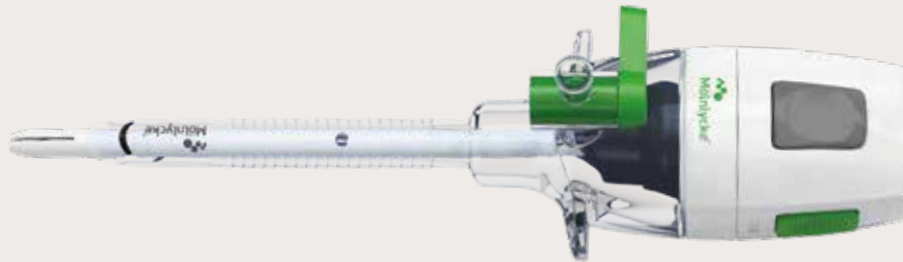

Der Trokar mit geschützter Klinge ist ein steriles Einweginstrument, das bei einer Vielzahl von minimal-invasiven Eingriffen verwendet werden kann, um einen Zugang für laparoskopische Instrumente zu schaffen. Er besteht aus einem Obturator und einer transparenten Trokarschleife. Der Obturator verfügt über eine scharfe Klinge und einen gefederten Schutzmechanismus, der die Klinge während des Einführens freilegt. Die Klingenspitze wird nach dem Eintritt in die Bauch- oder Brusthöhle abgedeckt, um innere Strukturen vor Punktionen oder Verletzungen zu schützen. Die Trokarschleife verfügt über zwei Dichtungssysteme, eine Universaldichtung und eine Entenschnabeldichtung, um den Gasaustritt während des Instrumentenwechsels zu minimieren, sowie einen Luer-Anschluss, für die Gasinsufflation und Desufflation.

- Ein umfangreiches Sortiment ergonomischer geformter Trokare für einen einfachen Zugang zur Bauchhöhle
- Transparente, gerippte Hülse zur Visualisierung des Instruments und einer effektiven Fixierung in der Bauchwand
- Universaldichtung für Instrumente von 5 bis 15 mm, geeignet und zur Aufrechterhaltung des Pneumoperitoneums
- Abnehmbares Dichtungsgehäuse zur einfacheren Probenentnahme (bezieht sich auf 11 und 12 mm Trokare)

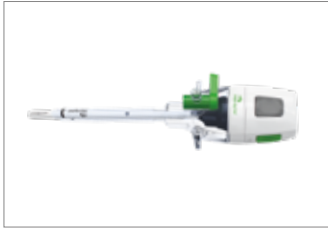

Trokar mit geschützter Klinge



Dual Pack

Trokar mit geschützter Klinge

Art.-Nr.	Ø	Länge	IV / VSK
899300	5 mm	70 mm	5 / 60
899301	5 mm	100 mm	5 / 60
899302	11 mm	100 mm	5 / 60
899303	11 mm	150 mm	5 / 30
899304	12 mm	100 mm	5 / 60
899305	12 mm	150 mm	5 / 30

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Dual Pack - Trokar mit geschützter Klinge

Art.-Nr.	Ø	Länge	IV / VSK
899337	5 mm	70 mm	5 / 60
899338	5 mm	100 mm	5 / 60
899339	11 mm	100 mm	5 / 60
899340	11 mm	150 mm	5 / 60
899341	12 mm	100 mm	5 / 60
899342	12 mm	150 mm	5 / 60

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Allgemeine Informationen

Sterilisation: Ethylenoxid

Haltbarkeit: Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

Verpackung: Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

Entsorgung: Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

Hersteller: Unimax Medical Systems Inc.;
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, DEUTSCHLAND, T +49 (0)211 920 880 F +49 (0)211 920 88 170 www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, ÖSTERREICH, T +43 1 278 85 42 F +43 1 278 85 42 199 www.molnlycke.at

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SCHWEIZ, T +41 44 744 54 00 F +41 44 744 54 11 www.molnlycke.ch/de-ch/

Die Marke Mölnlycke sowie Name und Logo sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEAT0254

Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien/>

