


Hasson Trokar



Der Hasson Trokar ist ein steriles Einweginstrument, das bei einer Vielzahl von minimal-invasiven Eingriffen verwendet werden kann, um einen Zugang für laparoskopische Instrumente zu schaffen. Dieser Trokar hat eine stumpfe Spitze, die für die offene Technik beim primären Zugang konzipiert wurde. Die Hülse verfügt über eine Fixiervorrichtung, eine Universaldichtung und einen Luer-Anschluss. Dieses Produkt ist in zwei Größen erhältlich: 11 mm und 12 mm.

- Ein umfangreiches Sortiment ergonomischer geformter Trokare für einen einfachen Zugang zur Bauchhöhle
- Transparente Hülse zur Visualisierung des Instruments und eine Fixiervorrichtung zur effektiven Befestigung in der Bauchwand
- Universaldichtung für Instrumente von 5 bis 12 mm, geeignet und zur Aufrechterhaltung des Pneumoperitoneums
- Abnehmbares Dichtungsgehäuse zur einfacheren Probenentnahme

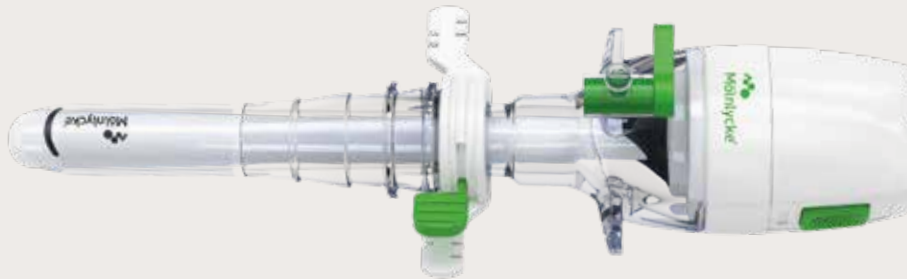

Hasson Trokar

Hasson Trokar

Art.-Nr.	Ø	Länge	IV / VSK
899306	11 mm	100 mm	5 / 60
899307	12 mm	100 mm	5 / 60

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Allgemeine Informationen

Sterilisation: Ethylenoxid

Haltbarkeit: Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

Verpackung: Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

Entsorgung: Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

Hersteller: Unimax Medical Systems Inc.;
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com