



Hasson Ballon Trokar

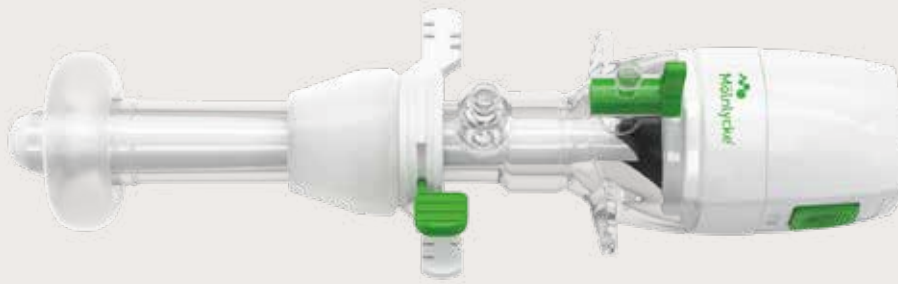

Der Hasson Ballon Trokar ist ein steriles Einweginstrument für die offene Zugangstechnik. Der Trokar besteht aus einem Obturator mit einer stumpfen Spitze, einer Hülse mit einer Fixiervorrichtung und einem Ballon. Mitgeliefert wird eine Spritze zum Aufblasen und Entleeren des Ballons. Beim Eindringen in die freie Bauch- oder Brusthöhle sorgt die stumpfe Spitze dafür, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung innenliegender Strukturen verringert wird. Der Hasson Ballon Trokar ist in einer Größe und einer Länge erhältlich: 12 mm Durchmesser und 100 mm Länge.

- Ein umfangreiches Sortiment ergonomischer geformter Trokare für einen einfachen Zugang zur Bauchhöhle
- Universaldichtung für Instrumente von 5 bis 12 mm, geeignet und zur Aufrechterhaltung des Pneumoperitoneums
- Abnehmbares Dichtungsgehäuse zur einfacheren Probenentnahme
- Dieses Produkt verfügt über einen Ballon und eine Fixiervorrichtung zur inneren und äußeren Verankerung während der Operation

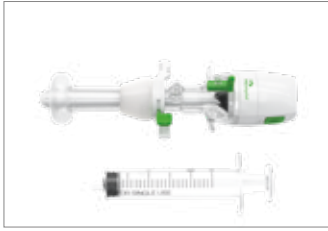

Hasson Ballon Trokar

Hasson Ballon Trokar

Art.-Nr.	Ø	Länge	IV / VSK
899329	12 mm	100 mm	5 / 60

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Allgemeine Informationen

Sterilisation: Ethylenoxid

Haltbarkeit: Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

Verpackung: Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

Entsorgung: Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

Hersteller: Unimax Medical Systems Inc.;
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com