


Monopolare Instrumente

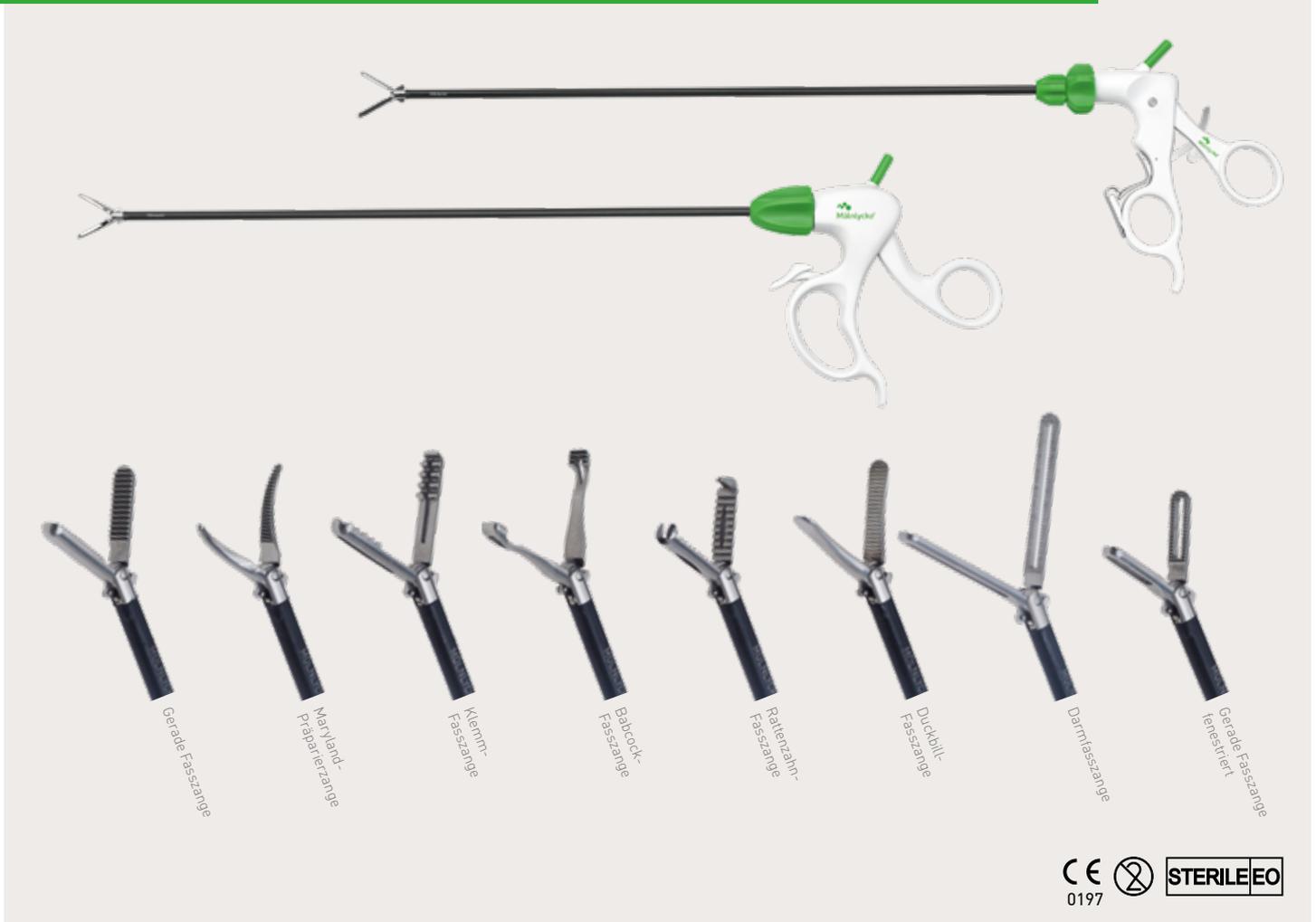

Die monopolare Instrumente können bei laparoskopischen Eingriffen verwendet werden, bei denen Dissektion, Greifen, elektrochirurgisches Schneiden und/oder Koagulieren notwendig ist. Die sterilen Instrumente weisen unterschiedliche Spitzen auf und haben einen rotierenden, isolierten Schaft mit einem Durchmesser von 5 mm. Zudem sind die Instrumente in zwei verschiedenen Griffdesigns mit einem Sperrklinkenmechanismus erhältlich (ausgenommen Maryland Präparierzange).

- Umfangreiche Auswahl an verschiedenen Branchen für ein komplettes chirurgisches Angebot
- Robuste, beidseitig bewegliche und weit öffnende Branchen
- Ein umfangreiches, hochwertiges Sortiment an monopolaren 5 mm Einweginstrumenten mit zwei unterschiedlichen Griffdesigns bietet dem Chirurgen die nötige Auswahl und höchsten Komfort
- Unsere monopolaren Instrumente sind mit allen elektrochirurgischen Generatoren kompatibel. Die Instrumente haben einen 4mm-Anschluss und sind mit monopolaren Instrumentenkabeln kompatibel, welche über einen 4 mm Anschluss verfügen

Die Instrumente können nur mit monopolaren elektrochirurgischen Generatoren in Übereinstimmung mit den Normen IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 und IEC 60601-2-2, einschließlich der geltenden nationalen/regionalen Bestimmungen, verwendet werden. Die Instrumente sind mit monopolaren elektrochirurgischen Generatoren von 2000 V & 390 kHz im schneidenden Modus; 3500 V & 390 kHz im Koagulationsmodus kompatibel. Empfohlene maximale Diathermieeinstellung zum Schneiden sind 50 W und zum Koagulieren 70 W. Die Höchstspannung beträgt 5,5 kVp.

Standard-Griff




Standard-Griff

Standard-Griff
Maryland

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV / VSK
899200	Gerade Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899201	Maryland-Präparierzange	5 mm	33 cm	10 / 100
899202	Klemm-Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899203	Babcock-Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899204	Rattenzahn-Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899205	Duckbill-Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899206	Darmfaszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899207	Gerade Faszange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Komfort-Griff

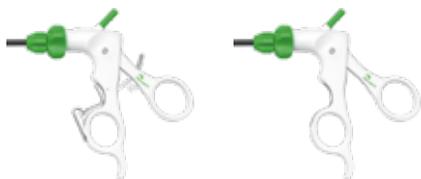

Komfort-Griff

Komfort-Griff
Maryland

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV / VSK
899208	Gerade Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899209	Maryland-Präparierzange	5 mm	33 cm	10 / 100
899210	Klemm-Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899211	Babcock-Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899212	Rattenzahn-Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899213	Duckbill-Faszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899214	Darmfaszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899215	Gerade Faszange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Allgemeine Informationen

Sterilisation: Ethylenoxid

Haltbarkeit: Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

Verpackung: Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

Material: DEHP- und Latexfrei.

Entsorgung: Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

Hersteller: Unimax Medical Systems Inc.;
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, DEUTSCHLAND, T +49 (0)211 920 880 F +49 (0)211 920 88 170 www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, ÖSTERREICH, T +43 1 278 85 42 F +43 1 278 85 42 199 www.molnlycke.at

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, SCHWEIZ, T +41 44 744 54 00 F +41 44 744 54 11 www.molnlycke.ch/de-ch/

Die Marke Mölnlycke sowie Name und Logo sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEAT0323

Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien/>

