


# Veressnadel




Die Veressnadel ist ein steriles Einweginstrument, das für den Aufbau eines Pneumoperitoneums vor einem minimal-invasiven Eingriff vorgesehen ist. Die Nadel besteht aus rostfreiem Edelstahl mit einem unter Federspannung stehenden Mandrin, der sich vorschiebt, um die Nadel abzuschirmen, sobald die Nadelspitze in die Bauchhöhle gelangt.

- Scharfe, angeschrägte Spitze ermöglicht eine einfache Perforation der Bauchwand
- Ein unter Federspannung stehender innerer Mandrin gibt eine akustische und taktile Rückmeldung über die korrekte Platzierung
- Stumpfer Mandrin deckt die Nadel ab, sobald die korrekte Positionierung erreicht wurde
- Beide Veressnadeln sind in der Größe 14 Gauge erhältlich
- Drehbarer High-Flow-Absperrhahn mit Luer-Lock-Konnektor
- Transparenter Griff mit eindeutiger, optischer, roter Positionsanzeige

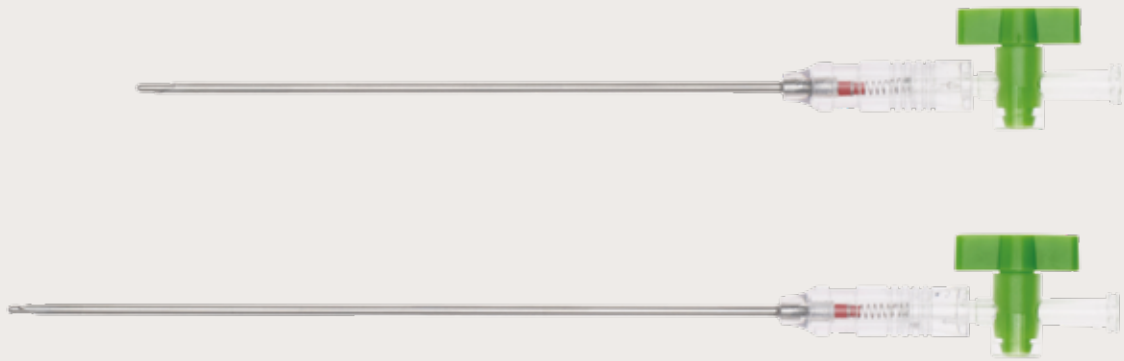

Veressnadel-Spitze

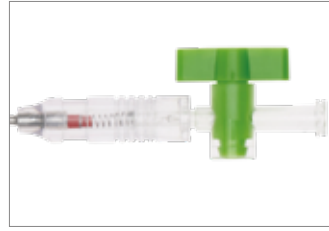

Veressnadel-Korpus

Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	IV / VSK
899105	Veressnadel	120 mm	25 / 500
899106	Veressnadel	150 mm	25 / 500

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

## Allgemeine Informationen

**Sterilisation:** Ethylenoxid

**Haltbarkeit:** Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

**Verpackung:** Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

**Material:** DEHP- und Latexfrei.

**Entsorgung:** Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

**Hersteller:** Unimax Medical Systems Inc.;  
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)